




i-BASEWAX



Modelling wax

Vaškas modeliavimui

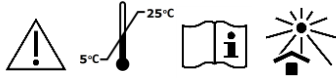

INSTRUCTION FOR USE

EN

INDICATIONS

- For the construction of the wax rim (for the record of central occlusion; for the selection of size and position of the anterior teeth)
- For the construction of the wax denture with set artificial teeth ("try in" patients' mouth; to test occlusal contacts)

DESCRIPTION

Modelling wax is a pink thermoplastic plate made of dental wax. Modelling wax can be easily softened over a flame, or otherwise, and modelled to the desired shape. Upon cooling, the wax retains its shape with great dimensional stability and excellent adhesiveness to the other dental materials involved.

INSTRUCTION FOR USE

Construction of the wax rim:

- Warm the wax plate and make a base on the patient's dental plaster cast model.
- Warm the other wax plate, twist the roller and press it on the top of the alveolar bone ridge of the cast.
- Adjust manufactured wax rim by hot wax knife to match the occlusion height.
- Place the manufactured wax rim into the patient's mouth, ask to clench the wax rollers placed in the central occlusion position.
- Set the patient's central occlusion height.
- On clenched wax roller, mark the guidelines for teeth size and position selection: anterior teeth and centre lines, position of canines, the smile and rest lines.

Construction of wax denture with artificial teeth set:

- Warm the wax plate, apply to the patient's dental plaster cast model.
- Model wax dental construction: set artificial teeth upright into wax base, shape artificial gums and any other base.
- Try the wax dental construction in the patient's mouth, test occlusal contacts.
- If wax construction fits well, finalize and prepare it for resin polymerization and pressing.

WARNINGS AND PRECAUTIONS!

NOTE! Do not use i-BASEWAX if patient is allergic to product or to any of the ingredients.

Prevention:

Wash hands thoroughly after handling. It is recommended to wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

STORAGE

Keep tightly closed in dry well-ventilated place at 5-25°C. Protect from direct sunlight and heat sources. The batch number should be quoted in all correspondence. See packaging for batch and expiry date. Do not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by national regulatory requirements. Keep out of the reach of children!

MANUFACTURERS RESPONSIBILITY

Our products have been developed for professional use in dentistry. As the application of our products is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our products in accordance with the applied standards.

PACKAGING

REF WA125 500g, pink, regular

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LT

INDIKACIJOS

- Vaškinio velenėlio su okliuziniais voleliais gamybai (centrinės okliuzijos aukščio nustatymui; priekinių dantų dydžio ir vietos parinkimui)
- Vaškinės dantų protezo konstrukcijos su sustatytais dirbtiniais dantimis suformavimui (primatavimui paciento burnoje; kontaktinių taškų patikrinimui)

PRIVALUMAI

Vaškas modeliavimui yra rožinės spalvos termostatinė plokštelė, pagaminta iš odontologinio vaško. Norima forma modeliuojama suminkštinus virš liepsnos ar kitaip veikiant šiluma. Atvėsinus, vaškas išlaiko suteiktą formą, pasižymi dideliu stabilumu ir puikiu sukibimu su kitomis dantų medžiagomis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Vaškinio velenėlio gamyba:

- Pašildykite vaško plokštelę ir ant gipsinio paciento dantų atspaudų modelio suformuokite bazę.
- Pašildykite kitą vaško plokštelę, susukite volelį ir jį užspauskite ant atspaudų alveolinio kaulo keteros viršūnės.
- Gautą vaškinį velenėlį su okliuziniais voleliais aplyginkite karštu vaško peiliu, kad atitiktų sąkandžio aukštį.
- Pagamintą vaškinį velenėlį įdėkite į paciento burną, paprašykite, kad sukastų centrinės okliuzijos padėtyje esančius vaškinio velenėlio volelius.
- Nustatykite paciento centrinės okliuzijos aukštį.
- Ant sukašto vaškinio velenėlio pažymėkite pagalbinės linijas skirtas dantų vietos ir dydžio parinkimui: priekinių dantų ir centro linijas, ilčių vietą, šypsenos bei ramybės būsenos linijas.

Vaškinės dantų protezo konstrukcijos su sustatytais dirbtiniais dantimis suformavimas:

- Pašildykite vaško plokštelę, ja apgaubkite gipsinį paciento dantų atspaudų modelį.
- Modeliuokite vaškinę protezo konstrukciją: į vaškinę bazę statmenai sustatykite dantis, suformuokite dirbtines dantenas bei visą kitą bazę.
- Primatuokite vaškinę protezo konstrukciją paciento burnoje, patikrinkite kontaktinius taškus.
- Jei vaškinė konstrukcija tinkama, galutinai sumodeliuokite ir paruoškite ją plastmasės polimerizavimui ir presavimui.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS!

PASTABA! Nenaudokite i-BASEWAX, jei pacientas yra alergiškas produktui ar jo sudėtinėms dalims.

Prevenција:

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

LAIKYMAS

Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje esant 5-25°C temperatūrai. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Partijos numeris turi būti nurodytas visoje korespondencijoje. Partijos numeris ir galiojimo data nurodyti ant pakuotės. Nenaudoti produkto pasibaigus jo galiojimo terminui. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje!

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime kontroliuoti kaip šis produktas naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės atitiktį galiojantiems standartams.

PAKUOTĖ

REF WA125 500g, rožinis, įprastinis

MANUFACTURER / GAMINTOJAS



i-dental®

UAB „Medicinos linija“
Karaliaučiaus str. 29
LT-78348 Siauliai
Lithuania
Tel.: +370 41 553 553
info@i-dental.lt, www.i-dental.lt

Last revised: 2020-03