
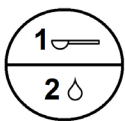


CE
2797

i-FIX®

- EN** Glass ionomer luting cement for cementation of crowns, bridges, inlays, onlays, orthodontic brackets and bands
- ES** Ionómero de vidrio cementante de fijación para cementaciones de coronas, puentes, incrustaciones dentales intra-coronarias, incrustaciones dentales extra coronarias, brackets y bandas de ortodoncia
- LT** Stiklo jonomerinis cementas, skirtas vainikėlių ir tiltų, įklotų, užklotų, ortodontinių žiedų ir breketų cementavimui
- PL** Cement glasonomerowy do mocowania koron, mostów, inlays, onlays, zamków i taśm ortodontycznych
- RO** Ciment din ionomer de sticlă pentru cimentarea coroanelor, punților, incrustațiilor, brichetelor ortodontice și benzilor
- RU** Стеклоиономерный фиксирующий цемент для фиксации коронок и мостов, вкладок и накладок, ортодонтических аппаратов
- UA** Склоіономерний фіксуючий цемент для фіксації коронок і мостів, вкладок і накладок, ортодонтичних апаратів

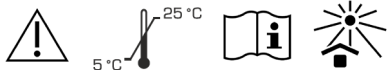

EN ISO 9917-1 4.2a Glass Polyalkenoate Cement

INSTRUCTION FOR USE **EN**

DESCRIPTION

i-FIX is a chemical cure glass ionomer fixing cement with high adhesion to dentin, enamel and non-precious alloys. Has low film thickness, good translucency and excellent biocompatibility.

INSTRUCTION FOR USE

NOTE! Do not use if primary package is broken.

1. Prepare surface as always. For deep cavities use calcium hydroxide liner.
2. Mixing ratio: 1 level spoon of powder / 2 drops of liquid. Lightly tap the bottle of powder against the hand before dispensing. Do not shake or invert. Hold liquid bottle vertically upright and squeeze gently when dispense a liquid.
3. For mixing use metal or plastic spatula and glass slab or paper mixing pad. Divide powder into two parts. Mix the first half of powder with liquid for 10 seconds, and then add remainder. Mix until exact consistency is reached. Total mixing time is 30 seconds. Do not add powder in small portions.
NOTE! As i-FIX highly adhesive, clean all instruments before cement set on.
4. The working area must be kept dry. Apply the mixed cement with suitable instrument to both restoration and prepared tooth immediately after mixing. Total working time is 2 minutes including mixing. Excess cement may be removed immediately or after cement has set. Do not attempt to remove excess cement in the phase of setting (1.5-6 minutes from start of mix) as adhesion may be impaired.
5. After 8 minutes from start of mixing restoration is ready for finishing.
6. Higher amount of powder or higher temperature shorten the working/setting time and lower temperature or higher amount of liquid prolong the working/setting time.

WARNINGS AND PRECAUTIONS!

NOTE! Do not use i-FIX if patient is allergic to product or to any of the ingredients.

Hazard and precautionary statements:

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash hands thoroughly after handling. Avoid contact with eyes. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical advice/attention as soon as possible.

STORAGE

Keep tightly closed in dry well-ventilated place at 5-25°C. Protect from moisture, direct sunlight and heat sources. The batch number should be quoted in all correspondence. See packaging for batch and expiry date. Do not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by national regulatory requirements. Keep out of the reach of children!

MANUFACTURERS RESPONSIBILITY

Our products have been developed for professional use in dentistry. As the application of our products is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our products in accordance with the applied standards.

PACKAGING

REF IIXTP 20g powder, 13g liquid, measuring scoop, mixing pad

INSTRUCCIONES DE USO **ES**

DESCRIPCIÓN

i-FIX es ionómero de vidrio de curado químico, un cemento de fijación con alta adhesión a la dentina, al esmalte y aleaciones no preciosas. Posee un bajo espesor de película, buena translucidez y excelente bio-compatibilidad.

INSTRUCCIONES DE USO

¡NOTA! No utilizar si el envase está roto.

1. Prepare la superficie como siempre. Para cavidades profundas use revestimientos de hidróxido de calcio.
2. Proporción de mezcla: 1 cucharada de polvo / 2 gotas de líquido. Golpee suavemente el frasco de polvo contra la mano antes de dispensar. No agite o invierta. Mantenga la botella de líquido en posición vertical y apriétela suavemente mientras dispensa el líquido.
3. Para mezclar use una espátula metálica o plástica y un bloque de mezcla. Divida el polvo en dos partes. Mezcle la primera mitad del polvo con el líquido por 10 segundos, y después agregue el resto. Mezcle hasta obtener la consistencia deseada. Tiempo total de mezclado 30 segundos. No añada polvo para pequeñas porciones.
¡NOTA! Como i-FIX es altamente adhesivo limpiar todos los instrumentos antes de que el cemento endurezca totalmente.
4. El área de trabajo debe mantenerse seca. Aplicar el cemento mezclado con el instrumento adecuado tanto para la restauración como para la preparación del diente inmediatamente después del mezclado. El tiempo total de trabajo es de 2 minutos incluyendo el mezclado. El exceso de cemento debe ser removido inmediatamente o después de que el cemento haya endurecido totalmente. No intente eliminar el exceso de cemento en la fase de fraguado (1.5-6 minutos del comienzo de la mezcla) ya que la adhesión puede verse afectada.
5. Después de 8 minutos de empezar a mezclar la restauración esta lista para el terminado.
6. Altas cantidades de polvo o altas temperaturas reducen el tiempo de trabajo/fraguado y bajas temperaturas o altas cantidades de líquido aumentan el tiempo de trabajo/fraguado.

¡ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES!

¡NOTA! No utilice i-FIX si el paciente es alérgico al producto o a cualquiera de sus componentes.

Declaraciones de peligro y precauciones:

Llevar guantes / ropa de protección / gafas de protección. Lávese bien las manos después de manipular el producto. Evite el contacto con los ojos. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

ALMACENAMIENTO

Mantener el recipiente bien cerrado y en lugar seco y bien ventilado de 5-25°C. Proteger de la luz del sol y fuentes de calor. El número de lote debe incluirse en toda la correspondencia. El número de lote y la fecha de expiración están impresos en el paquete. No utilizar después de la fecha de caducidad. Eliminar el contenido / recipiente como es requerido por los reglamentos nacionales. ¡Mantener fuera del alcance de los niños!

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

Nuestros productos han sido desarrollados para uso profesional en odontología. Como la aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control, el usuario es totalmente responsable de la aplicación. Por supuesto, garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las normas aplicadas.

PRESENTACIÓN

REF IIXTP 20g de polvo, 13g de líquido, cuchara medidora, bloc de mezcla

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA **LT**

APRĄSYMAS

i-FIX yra cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas, gerai sukimbantis su dentinu, emaliu ir įvairiais ne tauriųjų metalų lydiniais. Pasižymi dideliu skaidrumu ir biologiniu suderinamumu. Cementą galima aplikuoti plonu sluoksniu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PASTABA! Nenaudokite, jei pažeista pirminė pakuotė.

1. Paruoškite paviršių kaip įprasta. Giliose ertmėse naudokite kalcio hidroksido pamušalą.
2. Maišymo santykis: Maišymo santykis: 1 nubrauktas šaukštelis miltelių / 2 lašai skysčio. Prieš naudojimą lengvai pastuksenkite miltelių buteliuką į delną. Nekratykite ir neapverskite. Lašindami skystį, laikykite skysčio buteliuką vertikaliai, spauskite švelniai.
3. Maišymui naudokite metalinę ar plastikinę lopetėlę ir stiklinį ar popierinį maišymo padą. Padalinę miltelius į dvi dalis, pirmąją miltelių dalį sumaišykite su skysčiu. Maišykite 10 sekundžių, po to pridėkite kitą dalį ir maišykite kol pasieksite reikiamą konsistenciją. Visas maišymo laikas 30 sekundžių. Nedėkite miltelių maišymui mažomis dalimis.
PASTABA! Kadangi i-FIX yra labai lipnus, nuvalykite instrumentus nelaukdamai kol cementas sukietės.
4. Darbinis paviršius turi būti sausas. Cementą Jums patogiu instrumentu dėkite ant paruošto danties paviršiaus iš karto po sumaišymo. Plombavimo laikas 2 minutės, skaičiuojant nuo maišymo pradžios. Cemento perteklių galima pašalinti iš karto arba tik tada, kai cementas sukietėja. Nebandykite pašalinti cemento pertekliaus kietėjimo metu (1.5-6 minutės nuo maišymo pradžios), nes dėl to gali sumažėti sukibimas.
5. Po 8 minučių, skaičiuojant nuo maišymo pradžios, restauraciją galite užbaigti.
6. Didėsni miltelių kiekis ar aukštesnė aplinkos temperatūra sutrumpina plombavimo/kietėjimo laiką, žemesnė aplinkos temperatūra ar didesnis skysčio kiekis prailgina plombavimo/kietėjimo laiką.

ISPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS!

PASTABA! Nenaudoti i-FIX, jei pacientas yra alergiškas produktui ar jo sudėtinėms dalims.

Pavojai ir atsargumo frazės:

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Vengti patekimo į akis. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kaip galima greičiau kreiptis į gydytoją.

LAIKYMAS

Laikyti produktą sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje esant 5-25°C temperatūrai. Saugoti nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Partijos numeris turi būti nurodytas visoje korespondencijoje. Partijos numeris ir galiojimo data nurodyti ant pakuotės. Nenaudoti produkto pasibaigus jo galiojimo terminui. Turini/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje!

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime kontroliuoti kaip šis produktas naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės atitiktį galiojantiems standartams.

PAKUOTĖS

REF IIXTP 20g milteliai, 13g skystis, matavimo samtelis, popierėliai maišymui

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PL

OPIS

i-FIX jest chemoutwardzalnym cementem glasonomerowym o wysokiej adhezji do zębiny, szkliwa oraz stopów metali nieszlachetnych. Można nanosić go cienkimi warstwami, posiada dobrą przeźroczystość i wyjątkową biokompatybilność.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

UWAGA! Nie używaj, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

1. Przygotuj ubytek w sposób tradycyjny. Do głębokich ubytków użyj podkład z wodorotlenku wapnia.
2. Stosunek mieszania: 1 płaska miarka proszku / 2 krople płynu. Przed pobraniem proszku nie wstrząsać i nie przewracać butelki, tylko lekko postukać butelką o dłoń. Butelkę z płynem obrócić pionowo i delikatnie wycisnąć potrzebną ilość kropli płynu.
3. Do mieszania użyj szpatułki metalowej lub plastikowej oraz podkładu szklanego lub papierowego. Podziel proszek na dwie części, jedną część mieszaj z płynem przez 10 sekund, następnie dodaj pozostałą część proszku. Mieszaj dopóki nie osiągniesz właściwej konsystencji. Całkowity czas mieszania wynosi 30 sekund. Nie dodawaj proszku małymi porcjami.
- UWAGA!** Ponieważ i-FIX posiada silną adhezję oczyść wszystkie narzędzia przed związaniem cementu.
4. Pole pracy musi być suche. Używając właściwego instrumentu nałoż gotowy cement na przygotowany ząb oraz element do zamocowania. Całkowity czas pracy wynosi 2 minuty włączając mieszanie. Nadmiar cementu może być usunięty natychmiast albo po jego związaniu. Nie usuwaj nadmiaru cementu w fazie wiązania (1.5 – 6 min. od rozpoczęcia mieszania) ponieważ może to osłabić adhezję.
5. Po 8 minutach od rozpoczęcia mieszania mocowanie jest gotowe do ostatecznego wykończenia.
6. Wyższa zawartość proszku albo wyższa temperatura skraca czas pracy/wiązania, a niższa temperatura albo wyższa ilość płynu przedłuża czas pracy/wiązania.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

UWAGA! Nie używać i-FIX, jeżeli wiadomo, że pacjent ma alergię na produkt lub którykolwiek ze składników.

Zagrożenia i środki ostrożności:

Używaj rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyj ręce po zastosowaniu. Unikaj kontaktu z oczami. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płucz wodą przez kilka minut. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płucz. Zasięgnij porady lekarza tak szybko jak to możliwe.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-25°C, w dobrze zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym i suchym miejscu. Chronić przed wilgocią, źródłami ciepła i bezpośrednim światłem słonecznym. Numer partii musi być podany we wszelkiej korespondencji. Numer partii i data ważności są wskazane na opakowaniu. Nie stosować po upływie daty ważności. Zużyte opakowania i resztki produktu utylizować zgodnie z przepisami krajowymi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Nasze produkty zostały opracowane do profesjonalnego stosowania w stomatologii. Ponieważ wykorzystanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, końcowy użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ich właściwe stosowanie. Z naszej strony gwarantujemy jakość naszych produktów zgodnie z obowiązującymi normami.

OPAKOWANIA

REF IIXTP 20g proszek, 13g płyn, miarka, podkład

INSTRUCȚIE PENTRU UTILIZARE

RO (MD)

DESCRIERE

i-FIX este un ciment pentru fixare din ionomer de sticlă de polimerizare chimică cu aderență înaltă la dentină, smalt și aliaje neprețioase. Are o grosime scăzută, o transparență bună și biocompatibilitate excelentă.

INSTRUCȚIE PENTRU UTILIZARE

NOTĂ! Nu utilizați produsul dacă ambalajul primar este deteriorat.

1. Se pregătește suprafața ca de obicei. În zonele apropiate de pulpă se folosește o căptușeală din hidroxid de calciu.
2. Raportul de amestecare: 1 lingură dozatoare de pulbere / 2 picături de lichid. Loviți ușor flaconul cu pulbere împotriva mâinii înainte de distribuire. Nu agitați sau invertiți. Tineți flaconul cu lichid în poziție verticală și strângeți ușor când distribuiți lichidul.
3. Pentru amestecare utilizați o spatulă din metal sau plastic sau o placă de sticlă sau hârtie pentru amestecare. Împărțiți praful în două părți. Se amestecă prima jumătate de pulbere cu lichid timp de 10 secunde, iar apoi se adaugă restul. Se amestecă până se ajunge la consistența exactă. Timpul total de amestecare este de 30 secunde. Nu adăugați pulberea în porții mici.
- NOTĂ!** Câci i-FIX e extrem de adeziv, curățați toate instrumentele înainte ca cimentul să se întărească.
4. Zona de lucru trebuie să fie păstrată uscată. Aplicați cimentul amestecat cu un instrument adecvat imediat după amestecare la ambele restaurări și dinții pregătiți. Timpul total de lucru este de 2 minute, inclusiv amestecarea. Excesul de ciment poate fi îndepărtat

imediat sau după ce a fost întărit. Nu încercați pentru a îndepărta excesul de ciment în faza de întărire (1.5-6 minute de la început de amestec), în acest caz aderența poate fi afectată.

5. După 8 minute de la început de amestecare, restaurarea este gata pentru finisare.
6. O cantitate mai mare de pulbere sau o temperatură mai mare prescurtează timpul lucrului și temperatura mai scăzută sau o cantitate mai mare de lichid prelungeste timpul lucrului.

ATENȚIUNI ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE!

NOTĂ! Nu folosiți i-FIX dacă pacientul este alergic la produs sau la oricare dintre celelalte componente.

Măsuri de precauție și anti-pericol:

Purtați mănuși, îmbrăcăminte de protecție / ochelari de protecție / o protecție pentru față. Spălați bine mâinile după lucru. Evitați contactul cu ochii. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți ușor lentilele de contact, dacă este cazul. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul cât mai curând posibil.

MODUL DE PĂSTRARE

Păstrați containerul ermetic închis, într-un loc uscat, bine ventilat, la 5-25° C. Feriți de caldură și razele directe ale soarelui. Numărul lotului trebuie indicat în toate corespondențele. Numărul lotului și data expirării sunt indicate pe pachet. Nu folosiți după data de expirare. A nu se utiliza după data de expirare. Aruncați conținutul /containerul, în conformitate cu cerințele naționale de reglementare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI

Produsele noastre au fost dezvoltate pentru uzul profesional în stomatologie. Precum aplicarea produselor noastre este dincolo de controlul nostru, utilizatorul este pe deplin responsabil pentru aplicarea lui. Desigur, vă garantăm calitatea produselor noastre, în conformitate cu standardele aplicate.

AMBALAREA

REF IIXTP 20g pulbere, 13g lichid, linguriță de măsurare, bloc de foi pentru amestecare

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

RU

ОПИСАНИЕ

i-FIX – это стеклоиономерный цемент химического отверждения, с хорошей адгезией к дентину, эмали и ко всем видам недрагоценных металлических сплавов. Это быстро твердеющий, отличающийся большой прозрачностью и биологической совместимостью цемент. Цемент можно наносить тонким слоем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ! Не использовать продукта, если повреждена первичная упаковка.

1. Подготовьте полость обычным для вас способом. Глубокие полости покройте подкладочным материалом на основе гидрата окиси кальция.
2. Соотношение смешивания: 1 полная (без верха) ложка порошка / 2 капли жидкости. Слегка встряхните бутылку порошка, слегка постукивая ею о ладонь. Не трясите и не переворачивайте. Аккуратно выдавите жидкость, держа бутылку жидкости вертикально вниз.
3. Для смешивания используйте металлический или пластиковый шпатель и стеклянную или бумажную подставку для смешивания. Разделите порошок на две части. В течение 10 секунд смешайте первую половину порошка с жидкостью, затем добавьте остальную половину. Смешивайте, пока не достигните нужной консистенции. Время смешивания 30 секунд. Не добавляйте порошок небольшими порциями.
- ВНИМАНИЕ!** Так как i-FIX очень липкий материал, инструменты очистите немедленно, пока цемент не затвердел.
4. Рабочая поверхность должна быть сухой. Нанесите цемент при помощи вам удобного инструмента и на реставрацию и на поверхность подготовленного зуба. Общее время работы составляет 2 минуты, включая смешивание. Излишки цемента могут быть удалены немедленно, либо после затвердения цемента. Не пытайтесь удалить излишки цемента в фазе твердения (1.5-6 минуты с начала смешивания), так как адгезия может быть нарушена.
5. По истечении 8 минут от начала смешивания реставрацию можно заканчивать.
6. Увеличенное количество порошка или повышенная температура помещения сокращает время пломбирования / отверждения, а более низкая температура, или увеличенное количество жидкости продлевает время пломбирования / отверждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

ВНИМАНИЕ! Не использовать i-FIX, если у пациента аллергия к продукту или его компонентам.

Опасности и меры предосторожности:

Пользоваться защитными перчатками и защитной одеждой, защитой глаз (лица). После использования тщательно промыть руки. Избегать попадания в глаза. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре 5-25°C. Предохранять от влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла. Номер партии должен указываться во всей корреспонденции. Номер партии и срок годности указаны на упаковке. Не использовать после истечения срока годности. Содержание/пустой контейнер утилизировать в соответствии национальным законом. Хранить в недоступном для детей месте!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Наши продукты разработаны для применения в стоматологии. Однако применение наших продуктов без нашего контроля находится исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших продуктов действующим стандартам.

УПАКОВКА

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

UA

ПЕРЕВАГИ

i-FIX - це склоіономерний цемент хімічного затвердіння, має гарну адгезію до дентину, емалі і до всіх видів недорогочінних металевих сплавів. Швидко твердне, відрізняється великою прозорістю і біологічної сумісністю. Цемент можна наносити тонким шаром.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

УВАГА! Не застосовувати препарат, якщо пошкоджена первинна упаковка.

1. Підготуйте порожнину звичайним для вас способом. Глибокі порожнини покрийте підкладковим матеріалом на основі гідрату окису кальцію.
2. Співвідношення змішування: 1 повна (без верху) ложка порошку / 2 краплі рідини. Злегка струсіть пляшку порошку, злегка постукуючи нею об долоню. Не трусіть і не перевертайте. Акуратно видавіть рідину, тримаючи пляшку рідини вертикально вниз.
3. Для змішування використовуйте металевий або пластиковий шпатель і скляну або паперову підставку для змішування. Розділіть порошок на дві частини. Протягом 10 секунд змішайте першу половину порошку з рідиною, потім додайте решту половину. Змішуйте, поки не досягнете потрібної консистенції. Час змішування 30 секунд. Не додавайте порошок невеликими порціями.
УВАГА! Так як i-FIX дуже липкий матеріал, інструменти очистіть негайно, поки цемент не затвердів.
4. Робоча поверхня повинна бути сухою. Нанесіть цемент за допомогою вам зручного інструменту і на реставрацію і на поверхню підготовленого зуба. Загальний час роботи становить 2 хвилини, включаючи змішування. Надлишки цементу можуть бути видалені негайно, або після затвердіння цементу. Не намагайтеся видалити надлишки цементу в фазі твердіння (1.5-6 хвилини з початку змішування), так як адгезія може бути порушена.
5. Після закінчення 8 хвилин від початку змішування реставрацію можна закінчувати.
6. Збільшена кількість порошку або підвищена температура приміщення скорочує час пломбування / затвердіння, а більш низька температура, або збільшена кількість рідини продовжує час пломбування / затвердіння.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

УВАГА! Не застосовувати препарат i-FIX, якщо у пацієнта алергія до продукту або його компонентів.

Небезпеки і запобіжні заходи:

Користуватися захисними рукавичками та захисним одягом, захистом очей (обличчя). Після використання ретельно промити руки. Уникати потрапляння в очі. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити глаза водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви ними користуєтесь і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. Негайно звернутися до лікаря.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати продукт щільно закритий, в сухому, добре вентиляваному місці при температурі 5-25°C. Оберігати від вологи, прямих сонячних променів і джерел тепла. Номер партії повинен вказуватися у всій кореспонденції. Номер партії і термін придатності вказані на упаковці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності. Зміст / порожній контейнер утилізувати відповідно до національних законів. Зберігати в недоступному для дітей місці!

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА

Наші продукти розроблені для застосування в стоматології. Однак застосування наших продуктів без нашого контролю перебуває виключно в сфері Вашої власної відповідальності. Зрозуміло, ми гарантуємо відповідність якості наших продуктів чинним стандартам.

УПАКОВКА

**MANUFACTURER / FABRICANTE / GAMINTOJAS / PRODUCENT /
PRODUCATOR / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ВИРОБНИК:**



UAB „Medicinos linija“
Karaliaucias str. 29
LT-78348 Siauliai
Lithuania
Tel.: +370 41 553 553
info@i-dental.lt, www.i-dental.lt