


i-SOL

- EN** **Conditioner for glass ionomer cements**
- ES** **Acondicionador para cementos de ionómero de vidrio**
- LT** **Kondicionierius stiklo jonomeriniams cementams**
- PL** **Kondycjoner do cementów glasjonomerowych**
- RU** **Кондиционер для стеклоиономерного цемента**

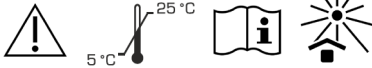

INSTRUCTION FOR USE EN

DESCRIPTION

i-SOL is a chemical curing conditioner to condition the surface of the tooth.

INSTRUCTION FOR USE

- NOTE! Do not use if primary package is broken.
1. Prepare surface as always. For deep cavities use calcium hydroxide liner.
 2. Apply i-SOL on prepared surface for 10 sec.
 3. Wash with water and dry with air.
 4. Apply glass ionomer cement, such as i-FIL, i-FIL LC, i-SIL and finish restoration.

WARNINGS AND PRECAUTIONS!

NOTE! Do not use i-SOL if patient is allergic to product or to any of the ingredients. **Hazard and precautionary statements:** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash hands thoroughly after handling. Avoid contact with eyes. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical advice/attention as soon as possible.

STORAGE

Keep tightly closed in dry well-ventilated place at 5-25°C. Protect from moisture, direct sunlight and heat sources. The batch number should be quoted in all correspondence. See packaging for batch and expiry date. Do not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by national regulatory requirements. Keep out of the reach of children!

MANUFACTURERS RESPONSIBILITY

Our products have been developed for professional use in dentistry. As the application of our products is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our products in accordance with the applied standards.

PACKAGING

REF ISOTP 6g liquid

INSTRUCCIONES DE USO ES

DESCRIPCIÓN

i-SOL es un acondicionador de curado químico para acondicionar la superficie del diente.

INSTRUCCIONES DE USO

- ¡NOTA! No lo use si el paquete primario está roto.
1. Prepare la superficie como siempre. Para cavidades profundas use revestimientos de hidróxido de calcio.
 2. Aplicar i-SOL en superficie preparada durante 10 segundos.
 3. Lavar con agua y secar con aire.
 4. Aplique cemento de ionómero de vidrio, como i-FIL, i-FIL LC, i-SIL y restauración final.

¡ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES!

¡NOTA! No utilice i-SOL Si el paciente es alérgico al producto o a cualquiera de los ingredientes.

Declaraciones de peligro y precauciones: Use guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección para la cara. Lavar Manos a profundidad después de manipular. Evite el contacto con los ojos. Si entra en contacto con los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Consiga atención médicos tan pronto como sea posible.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bien cerrado en un lugar seco bien ventilado entre 5-25°C. Proteger de la humedad, de la luz del sol directa y de fuentes de calor. El número de lote debe incluirse en toda la correspondencia. El número de lote y la fecha de expiración están impresos en el paquete. No lo use después de la fecha de caducidad. Deseche el contenido/contenedores según lo exijan los requisitos reglamentarios nacionales. ¡Manténgase fuera del alcance de los niños!

RESPONSABILIDAD DE LOS FABRICANTES

Nuestros productos se han desarrollado para uso profesional en odontología. A medida que la aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control, el usuario es plenamente responsable de la aplicación. Por supuesto, garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las normas aplicadas.

EMPAQUETADO

REF ISOTP 6g Líquido

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LT

APRAŠYMAS

i-SOL yra cheminio kietėjimo kondicionierius dantų paviršiui kondicionuoti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PASTABA! Nenaudokite, jei pažeista pirminė pakuotė.

1. Paruoškite paviršių kaip įprasta. Giliose ertmėse naudokite kalcio hidroksido pamušalą.
2. Padenkite paruoštą paviršių i-SOL ir palaiykite 10 sekundžių.
3. Nuplaukite vandeniu ir nudžiovinkite oru.
4. Naudokite stiklo jonomerinį cementą, tokį kaip i-FIL, i-FIL LC, i-SIL ir baikite restauraciją.

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS!

PASTABA! Nenaudoti i-SOL, jei pacientas yra alergiškas produktui ar jo sudėtinėms dalims.

Pavojai ir atsargumo frazės: Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Vengti patekimo į akis. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Kaip galima greičiau kreiptis į gydytoją.

LAIKYMAS

Laikyti produktą sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje esant 5-25°C temperatūrai. Saugoti nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Partijos numeris turi būti nurodytas visoje korespondencijoje. Partijos numeris ir galiojimo data nurodyti ant pakuotės. Nenaudoti produkto pasibaigus jo galiojimo terminui. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje!

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime kontroliuoti kaip šis produktas naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės atitiktį galiojantiems standartams.

PAKUOTĖ

REF ISOTP 6g skystis

INSTRUKCJA STOSOWANIA PL

OPIS

i-SOL jest to kondycjoner do chemicznej preparacji powierzchni ubytku zęba.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- UWAGA! Nie używaj, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
1. Przygotuj ubytek w sposób tradycyjny. Do głębokich ubytków użyj podkładu z wodorotlenku wapnia.
 2. Zastosuj i-SOL na 10 sekund na przygotowywaną powierzchnię.
 3. Wypłucz wodą i wysusz powietrzem.
 4. Zaaplikuj cement glasjonomerowy, taki jak i-FIL, i-FIL LC, i-SIL i opracuj końcowo wypełnienie.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!

UWAGA! Nie używać i-SOL, jeżeli wiadomo, że pacjent ma alergię na kondycjoner lub którykolwiek ze składników. **Zagrożenia i środki ostrożności:** Używać rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po zastosowaniu. Unikaj kontaktu z oczami. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płucz wodą przez kilka minut. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płucz. Zasięgnij porady lekarza tak szybko jak to możliwe.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-25°C, w dobrze zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym i suchym miejscu. Chronić przed wilgocią, źródłami ciepła i bezpośrednim światłem słonecznym. Numer partii musi być podany we wszelkiej korespondencji. Numer partii i data ważności są wskazane na opakowaniu. Nie stosować po upływie daty ważności. Zużyte opakowania i resztki produktu utylizować zgodnie z przepisami krajowymi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Nasze produkty zostały opracowane do profesjonalnego stosowania w stomatologii. Ponieważ wykorzystanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, końcowy użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ich właściwe stosowanie. Z naszej strony gwarantujemy jakość naszych produktów zgodnie z obowiązującymi normami.

OPAKOWANIA

REF ISOTP 6g płyn

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ RU

ОПИСАНИЕ

i-SOL – это кондиционер химического отверждения для кондиционирования поверхности зуба.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ВНИМАНИЕ! Не использовать продукта, если повреждена первичная упаковка.
1. Подготовьте полость обычным для вас способом. Глубокие полости покройте подкладочным материалом на основе гидрата окиси кальция.
 2. Нанесите i-SOL на поверхность зуба на 10 секунд.
 3. Затем промойте водой и высушите воздухом.
 4. Наложите стеклоиономерный цемент, такой как i-FIL, i-FIL LC, i-SIL и заканчивайте реставрацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

ВНИМАНИЕ! Не использовать i-SOL, если у пациента аллергия к продукту или его компонентам.

Опасности и меры предосторожности: Пользоваться защитными перчатками и защитной одеждой, защитой глаз (лица). После использования тщательно промыть руки. Избегать попадания в глаза. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить продукт плотно закрытый, в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре 5-25°C. Предохранять от влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла. Номер партии должен указываться во всей корреспонденции. Номер партии и срок годности указаны на упаковке. Не использовать после истечения срока годности. Содержание/пустой контейнер утилизировать в соответствии национальным законом. Хранить в недоступном для детей месте!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Наши продукты разработаны для применения в стоматологии. Однако применение наших продуктов без нашего контроля находится исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших продуктов действующим стандартам.

УПАКОВКА

REF ISOTP

бг жидкость

**MANUFACTURER / FABRICANTE / GAMINTOJAS / PRODUCENT /
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**



UAB „Medicinos linija“
Karaliaucius str. 29
LT-78348 Siauliai
Lithuania
Tel.: +370 41 553 553
info@i-dental.lt, www.i-dental.lt

Last revised: 2020-02